

ディープフリーザ・超低温フリーザ 温度管理の記録・監視に


チノーなら **機器+センサの組合せ** でご提供

新設のディープフリーザも、組合せならすぐにご使用いただけます。
既存システムへの追加・拡張もかんたんに可能です。

小規模から大規模まで
設置条件などにあわせたラインナップ・構成が可能

※Part11対応もご相談ください (MD8000シリーズも可)


保管庫温度監視

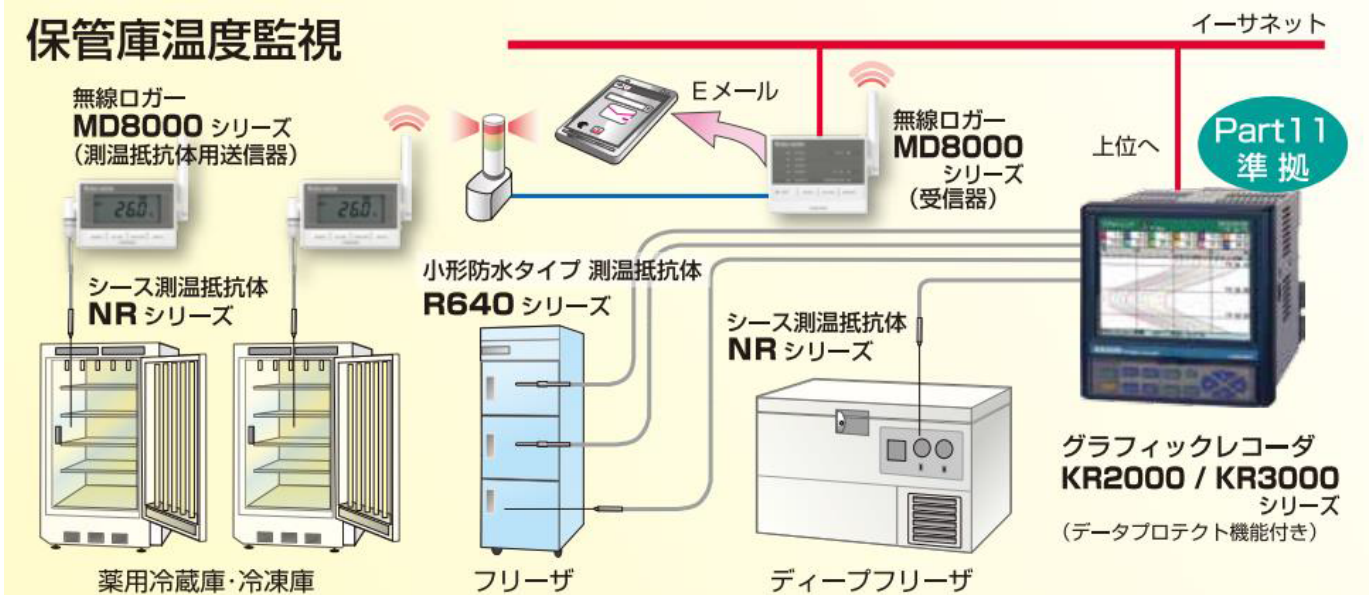

センサ

低温に適した高精度のセンサをご用意

クライオバイアル用 測温抵抗体 **R907** シリーズ

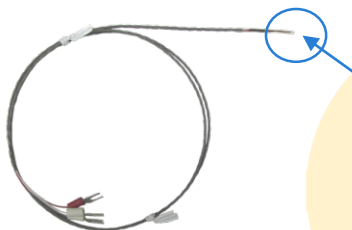

-196°Cでクラス A ($\pm 0.54^\circ\text{C}$) の対応可能

外部からの熱流入を受けにくい構造で、
速い応答性の円筒形、平面に取り付けやすい台形、
強度が高い保護管付きの3種を用意


素子：Pt100 Ω 3線式 (クラスA推奨)

測定範囲：-200°C~180°C

小規模にも

KRシリーズ

- ペーパレスタイプの記録計
- 異常時は警報出力も可能

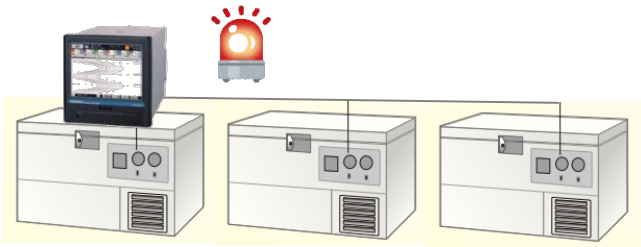

取っ手・ゴム足つきで
設置や移動も便利に

無線タイプ

MD8000シリーズ

- 専用ソフトでデータを一括管理・監視
- 異常時はメール通報
- 無線でデータを自動収集

- 見やすい表示
- 無線・コンパクト設計




さらに

CISAS

大規模・集中監視への拡張も可能



保管庫温度監視

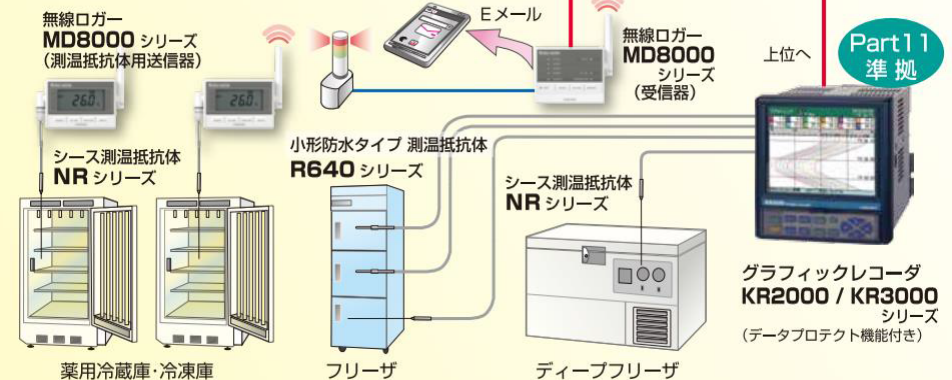

自宅・他拠点でも



※この資料の記載内容は 2020年 1 2月現在のものです。

CHINO

株式会社チノ

<https://www.chino.co.jp/>